



Dolphin Medical



TIJERAS

BIPOLARES AVANZADAS

Para cirugía abierta

Sella y corta vasos



www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical



www.dolphinmedical.com

**Precisión**

Punta curva y delgada, diseñada para trabajar con seguridad en espacios reducidos

**Temperatura baja**

Control energético preciso, aislamiento por ambas caras.

**Inteligente**

Retroalimentación táctil para un sellado y corte suaves y sin esfuerzo.

**Antiadherente**

Recubrimiento especial para una antiadherencia duradera.

Diseño de aislamiento térmico

Reduce la difusión del calor


Superficie texturizada con puntos de cerámica

Reduce la adherencia y mejora el agarre

40° mandíbula curva

Visión quirúrgica óptima

SL1500EA

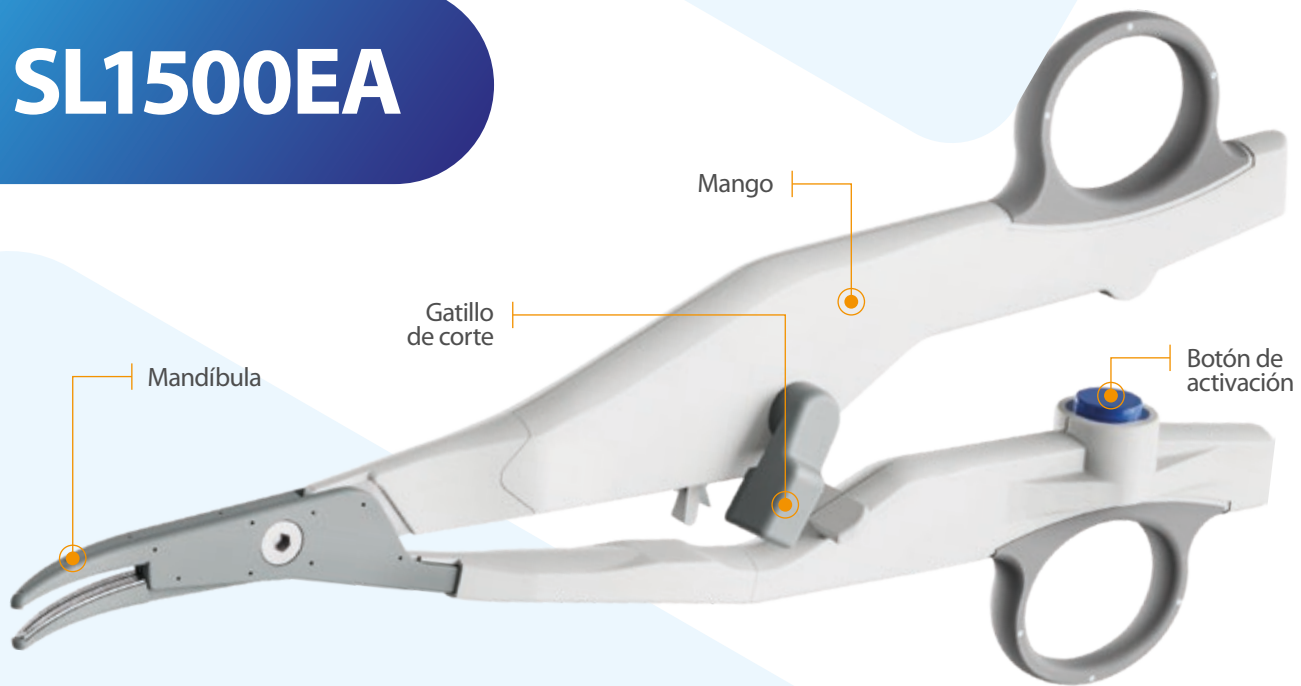

*Sellador de vasos tipo tijera para cirugía abierta.
Mandíbula curva de 40° para un acceso preciso en campos delicados. Diseca, sella y corta con un solo instrumento.
Su mango de anillos, de diseño ergonómico, ofrece un agarre cómodo y un control intuitivo.*

Aplicaciones quirúrgicas

**Cabeza y cuello:**

Tiroidectomía abierta, parotidectomía abierta, amigdalectomía abierta y disección radical abierta de ganglios linfáticos cervicales.

**Hepatobiliar**

Hepatectomía abierta, pancreatoduodenectomía abierta, cistectomía esplénica abierta y colecistectomía abierta.

**Gastrointestinal**

Gastrectomía abierta, resección colorrectal abierta y hemorroidectomía.

**Ginecológicas**

Histerectomía abierta, anexectomía abierta y disección abierta de ganglios linfáticos pélvicos.



**Precisión**

Mandíbulas curvas, afiladas y refinadas

**Temperatura baja**

Control energético preciso, aislamiento por ambas caras.

**Inteligente**

Retroalimentación táctil para un sellado y corte suaves y sin esfuerzo.

**Antiadherente**


Recubrimiento especial para una antiadherencia duradera.

Diseño de aislamiento térmico
Reduce la difusión del calor**Superficie texturizada con puntos de cerámica**

Reduce la adherencia y mejora el agarre

28° mandíbula curva

Visión quirúrgica óptima

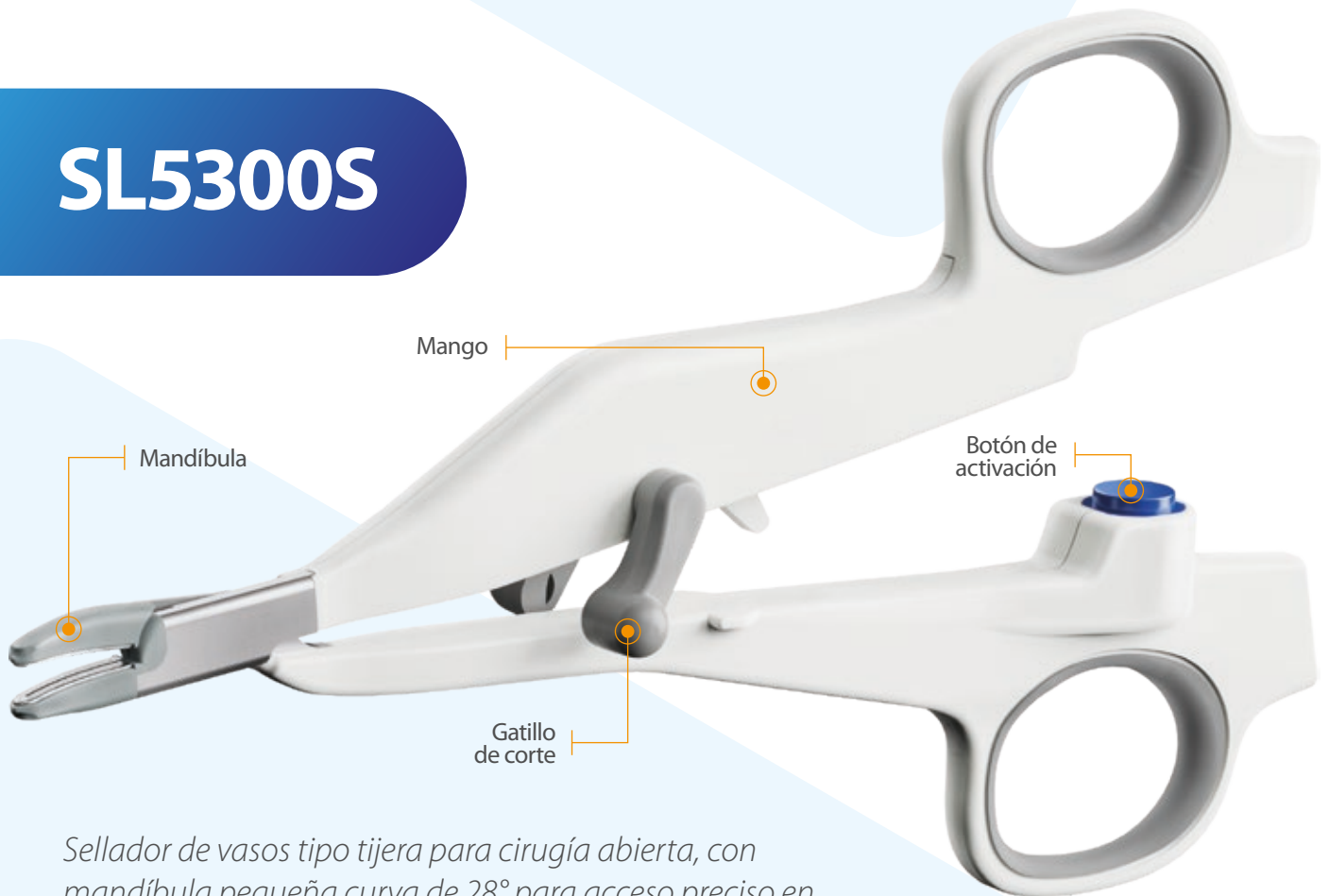**SL5300S**

Sellador de vasos tipo tijera para cirugía abierta, con mandíbula pequeña curva de 28° para acceso preciso en campos delicados. Diseca, sella y corta con un solo instrumento, mango ergonómico de anillos.

Aplicaciones quirúrgicas**Cabeza y cuello:**

Tiroidectomía abierta, parotidectomía abierta, amigdalectomía abierta y disección radical abierta de ganglios linfáticos cervicales.

**Gastrointestinal**

Gastrectomía abierta, resección colorrectal abierta y hemorroidectomía.

**Hepatobiliar**

Hepatectomía abierta, pancreatoduodenectomía abierta, cistectomía esplénica abierta y colecistectomía abierta.

**Ginecológicas**

Histerectomía abierta, anexectomía abierta y disección abierta de ganglios linfáticos pélvicos.





Modelo	Largo	Medida sellado	Medida corte	Curvatura de la mandíbula	Apertura mandibular
SL1500EA	21cm	20.6mm	19.8mm	40°	35°
SL5300S	18.8cm	16.5mm	14.7mm	28°	35°





Seguro y confiable



Feedback inteligente



Operación conveniente



SL100M

Aspectos claves

- Monitorización en tiempo real, funcionamiento seguro.
- Regulación inteligente, hemostasia eficiente.
- Protección a baja temperatura, pronóstico favorable.
- Instrumento multifuncional, conveniente y fiable.



Modo

Sellado

Bipolar

Potencia Nominal de Salida

250 W

95 W

Peso

5 kg (11.02 lbs)

Fondo

40 cm (15.75 in)

Ancho

32.5 cm (12.8 in)


Alto

13 cm (5.12 in)

PANEL TÁCTIL

Modo Agiseal

Ajuste de potencia

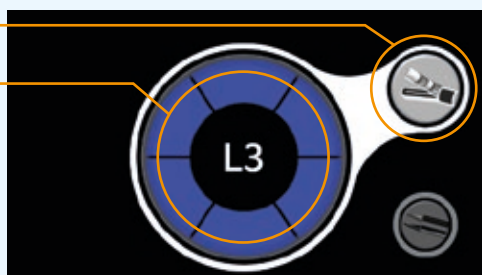

Ajuste de potencia

Modo bipolar



Modo AGISEAL cuenta con 4 niveles

Nivel de Potencia	L	L1	L2	L3
Potencia de salida / W	2	125	150	250

Modo BIPOLAR cuenta con 6 niveles



Nivel de Potencia	D1	D2	D3	D4	D5	D6
Potencia de salida / W	2	15	30	50	75	95





Seguro y confiable

Certificación bajo la MDR, permite un sellado seguro, hemostasia de vasos, conductos linfáticos y tejidos de hasta 7 mm.

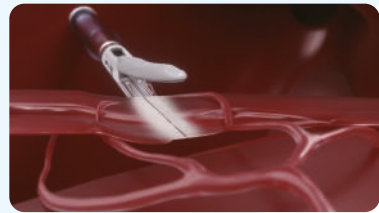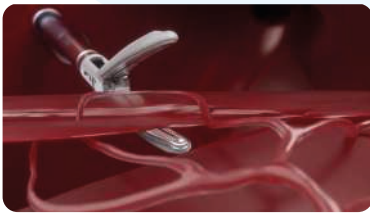

Eficiente e inteligente

Cuenta con más de 1.2 millones de detecciones y ajustes por segundos gracias a su monitoreo, control y retroalimentación inteligente en tiempo real, lo que permite un sellado rápido en 2 segundos y protección a baja temperatura a 60 °C.



Fácil manejo

Control mediante pantalla táctil con memoria inteligente para una configuración y funcionamiento simplificado.





Dolphin Medical

BOLIVIA

- 📍 Av. Piraí, 2do Anillo, Esq. Arumá,
Edificio Sta. Monica, 2da. Planta Of. 8
Sta. Cruz de la Sierra.
- ☎️ (59 1) 7213 3393
- ✉️ ventasdmb@dolphinmedical.com

CHILE

- 📍 Cerro el Plomo 6000
Las Condes - Santiago - Chile
- ☎️ (56 2) 2952 0165
- ✉️ ventas@dolphinmedical.com

COLOMBIA

- 📍 Calle 12 No. 2-35 Int. A
Cota - Cundinamarca
- ☎️ (57) 31 7893 8018
- ✉️ ventasdmc@dolphinmedical.com

PERÚ

- 📍 Jr. Diana Int. 2, MZ. D2, Lote. 25,
1° y 2° Piso URB Sta. Maria de Surco,
Santiago de Surco, Lima
- ☎️ (51 9) 3480 1987
- ✉️ ventasdmp@dolphinmedical.com