

# FLOUNDER®


MALLA PARA REFUERZO 100% POLIPROPILENO

PARA HERNIOPLASTÍAS

## Especificaciones Técnicas:

- 100% Polipropileno monofilamento
- Gramaje: 60g/m<sup>2</sup>
- Espesor: 0,53mm
- Diámetro del filamento 0,15mm
- Tamaño del poro 1,0 x 1,2mm
- Resistencia al estallido 670 kpa (ASTM D-3786)
- Resistencia a la tracción 320MD - 207CMD N/2.5cm (ASTM D-5034)
- Elongación de ruptura 69% MD - 119% CMD (ASTM D-5034)
- Tejido: Macroporoso/Monofilamento, mayor integridad tisular y menor riesgo de infección
- Ausencia de partículas y desmalladura, "menor inflamación"
- Tejido entrelazado "Efecto Memoria", conserva el tamaño original, resistente, soporta muy bien la tensión en sus bordes
- Corte con láser mayor adhesividad al tejido
- Estéril en Óxido de Etileno
- Vencimiento 2 años.



## Medidas

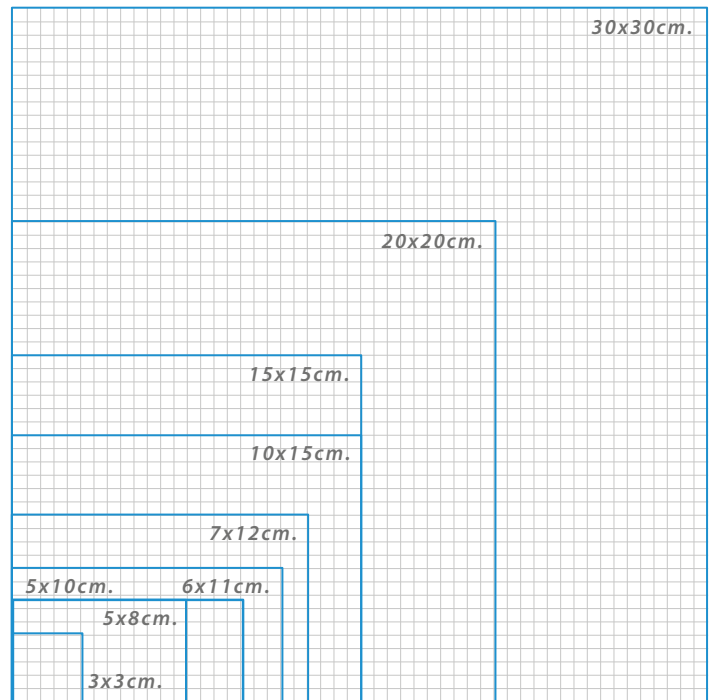

## FLOUNDER®

Código	Descripción Producto	Presentación
DM600303L	Flounder® 3x3cm	1 unidad
DM600508L	Flounder® 5x8cm	1 unidad
DM600510L	Flounder® 5x10cm	1 unidad
DM600608L	Flounder® 6x8cm	1 unidad
DM600611L	Flounder® 6x11cm	1 unidad
DM600712L	Flounder® 7x12cm	1 unidad
DM600715L	Flounder® 7x15cm	1 unidad
DM601010L	Flounder® 10x10cm	1 unidad
DM601015L	Flounder® 10x15cm	1 unidad
DM601515L	Flounder® 15x15cm	1 unidad
DM602020L	Flounder® 20x20cm	1 unidad
DM603030L	Flounder® O 30x30cm	1 unidad



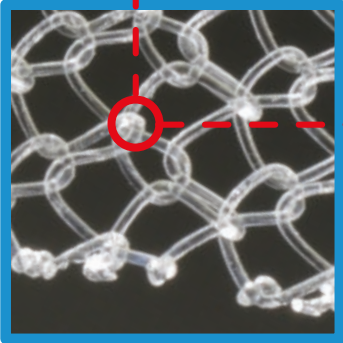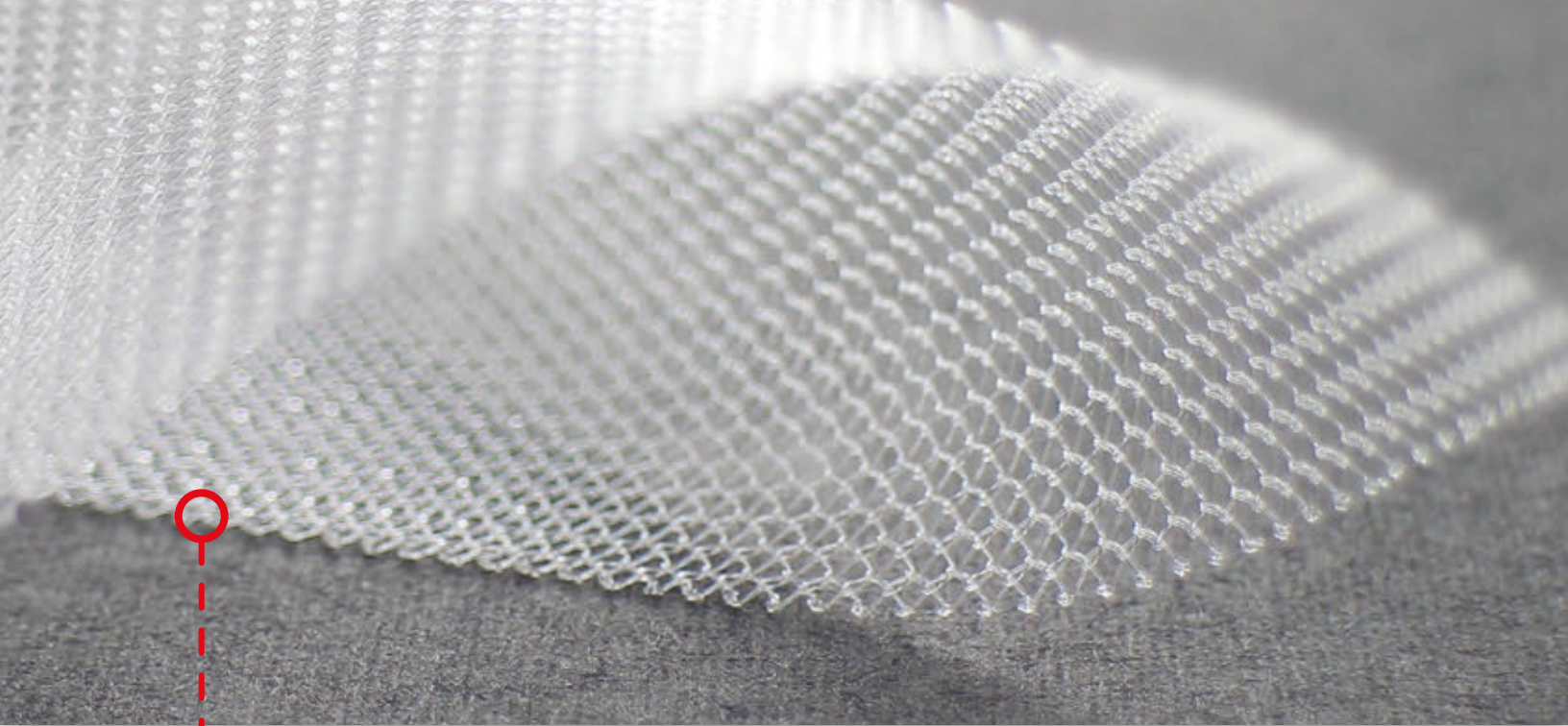

**Tejido macroporoso y monofilamento:** mayor integridad tisular y menor riesgo de infección.



**Bordes "romos" generados con tecnología de corte láser.**

Malla de polipropileno monofilamento de 60g/mt2 (imagen real aumentada).

### Estudio comparativo mediante microscopía electrónica.



#### Corte con cuchillo

Bordes filosos y puntiagudos lo que genera mayor inflamación y daño tisular, mayor riesgo de infección

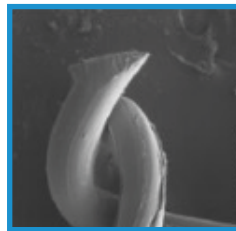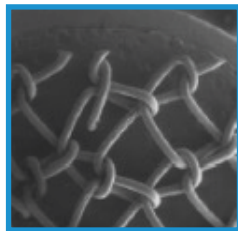

#### Corte con Láser

Bordes redondeados, ausencia de partículas y desmalladura, lo que genera menor inflamación

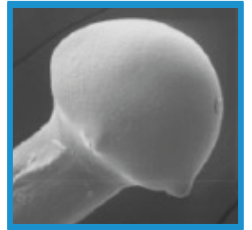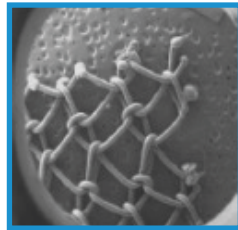

#### BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasdmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

#### CHILE

Callao 2970 Of. 806  
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

#### COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607  
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

#### PERÚ

Arica 655 Int 404  
Distrito Miraflores - Lima - Perú

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-26112019-REV-001