

GYNOCURETTE TWIST



este producto no fue
hecho con látex de
caucho natural

CURETA DE SUCCIÓN ENDOMETRIAL


La cánula Gynocurette es una cureta de succión endometrial de 3 mm de diámetro que tiene un filo similar a una Randall en su extremo distal y que se conecta con una jeringa de giro - bloqueo "twist" para proveer la succión segura durante el procedimiento sin riesgo de reflujo del contenido y la mayor comodidad para la paciente.

Características

- Cánula semirígida de 3.0mm graduada.
- Incluye una jeringa única con seguro **Twist-Antireflujo**.
- Desbloqueo seguro.
- Técnica rápida y simple.
- Punta y orientación protegida desde el empaque.
- Cureta y jeringa unidas por conexión luer lock.

Usos

- Está indicada para la obtención de muestras del revestimiento de tejido endometrial y capas superficiales de la pared endometrial uterina para estudio histológico.
- Producto estéril de un solo uso.

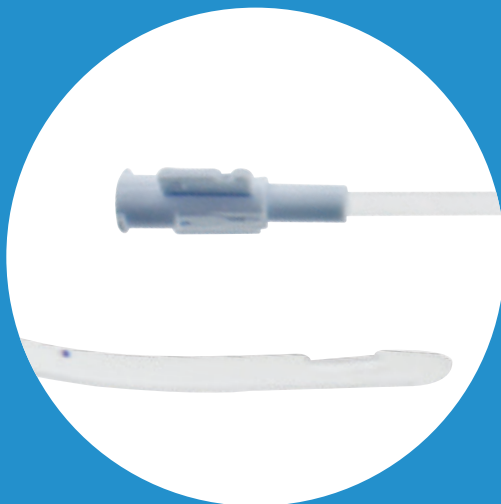

Código	Descripción Producto	Presentación
DMERD003	Gynocurette Twist	Caja x 25 unidades

BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

CHILE

Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

PERÚ

Jirón Diana Mz D2, lote 25, 3er Piso,
Int-4, urbanización Santa María de Surco,
Santiago de Surco

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-0511 2021-REV-001