

CVX-RIPE

Balón de dilatación cérvico-uterino



BALÓN DOBLE DE DILATACIÓN


El CVX-Ripe® proporciona simultáneamente una presión suave en el orificio interno y externo, así como dentro del canal cervical durante la inducción del parto.

CVX-Ripe® es un catéter de maduración transcervical de doble balón de silicona blanda destinado a proporcionar una presión mecánica suave para mejorar la favorabilidad del cuello uterino de pacientes embarazadas en la gestación a término, donde la inducción del trabajo de parto está médicamente indicada.

Los beneficios de diseño de CVX-Ripe incluyen:

- Los balones con forma cónica, diseñados sin espacio entre ellos, forman una forma de reloj de arena cuando se colocan en el paciente.
- La "nariz" de silicona suave y el cuerpo del catéter se combinan con un estilete flexible para equilibrar la seguridad con facilidad de inserción.
- El catéter está empaquetado con una jeringa de 20ml para mayor comodidad del médico.
- Puertos de inflación activados por Luer para una inflación fácil.
- El tubo del catéter es de 18 Fr.
- Volumen máximo balón canal uterino: 80ml. (solución salina estéril)
- Volumen máximo balón canal vaginal: 40ml. (solución salina estéril)
- No fabricado con látex, DEHP o BPA.
- Vida útil 5 años.

Volumen máximo 80ml

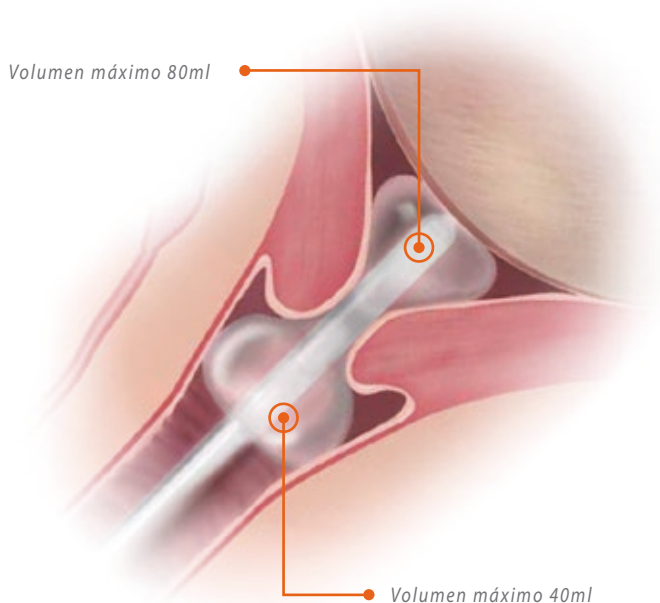

Volumen máximo 40ml

Código	Descripción Producto	Presentación
CVX-100	Balón de dilatación CVX-Ripe	Unitaria

BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasdmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

CHILE

Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

PERÚ

Jr. Diana M.Z.A D2 lote. 25 INT. 2
URB Santa María de surco piso 1 y 2
Santiago de surco, Lima

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-28092020-REV-001