

# ANGUILA<sup>®</sup>+

Sling suburetral tipo hamaca Dolphin para técnicas de TOT y TVT



Dolphin Medical

[www.dolphinmedical.com](http://www.dolphinmedical.com)




este producto no fue  
hecho con látex de  
caucho natural


Anguila®+ Cinta Suburetral fabricada a partir de Malla de material 100% polipropileno. Consta de una pieza de malla (cinta) de polipropileno cortada mediante láser que mide: 1,2 y 1,7cm de ancho x 40cm de largo, cubierta en sus extremos con una funda de plástico y lazos con hilo introductor en ambos extremos, para enhebrar las Agujas con ojal para su colocación.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 100% Polipropileno monofilamento
- Gramaje: 40g/m<sup>2</sup>
- Espesor: 0,45mm
- Diámetro del filamento 0,10mm
- Tamaño del poro 1,0 x 1,7mm
- Resistencia al estallido 470 kpa (ISO 13937-1)
- Resistencia a la tracción 250MD - 100CMD N (ISO 13934-1)
- Elongación de ruptura 40% MD - 140% CMD (ISO13934-1)
- Tejido: Macroporo/Monofilamento, mayor integridad tisular y menor riesgo de infección
- Ausencia de partículas y desmalladura, "menor inflamación" e impide la rigidez
- Punta atraumática disminuye la fuerza de tracción
- Brazos protegidos con funda que impide un posible daño tisular
- Brazos con lazos de colores y enhebrador
- Tejido entrelazado "Efecto Memoria", conserva el tamaño original e impide la rigidez
- Corte con láser mayor adhesividad al tejido y menor injuria sobre la mucosa vaginal.
- Estéril en Óxido de Etileno
- Vencimiento 2 años.

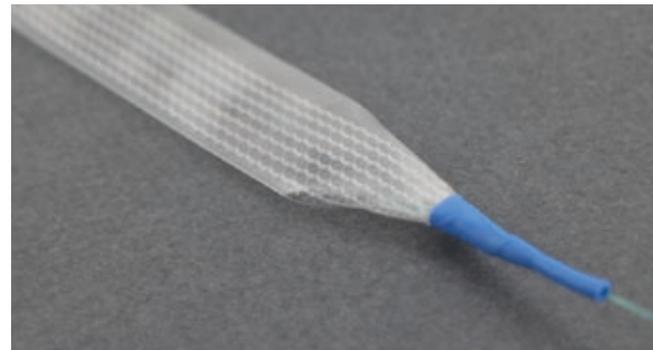

Funda de polietileno ayuda a disminuir el posible daño tisular

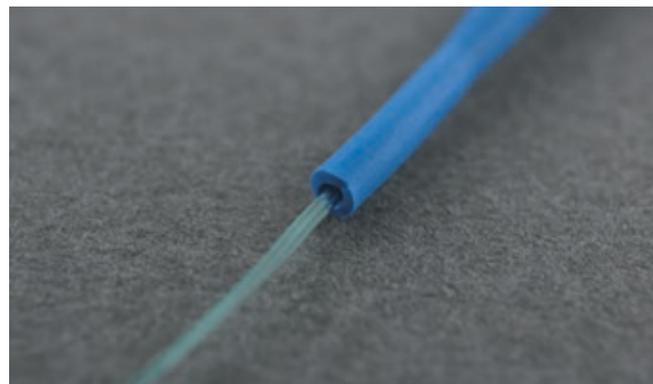


Punta atraumática disminuye la fuerza de tracción





La Anguila® + fué diseñada para el uso como "Hamaca" suburetral para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo ocasionada por hipermovilidad o deficiencia intrínseca del esfínter. El uso de este producto está previsto para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) en mujeres (procedimientos de cinta vaginal libre de tensión (TVT, Trans Vaginal Tape por sus siglas en inglés) y cinta transobturadora (TOT, Trans Obturator Tape, por sus siglas en inglés) estádiseñada para levantar la vejiga o la uretra hacia la posición normal.)

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>
REF: DM125101	Anguila®+ 1,2cm
REF: DM125102	Anguila®+ 1,7cm

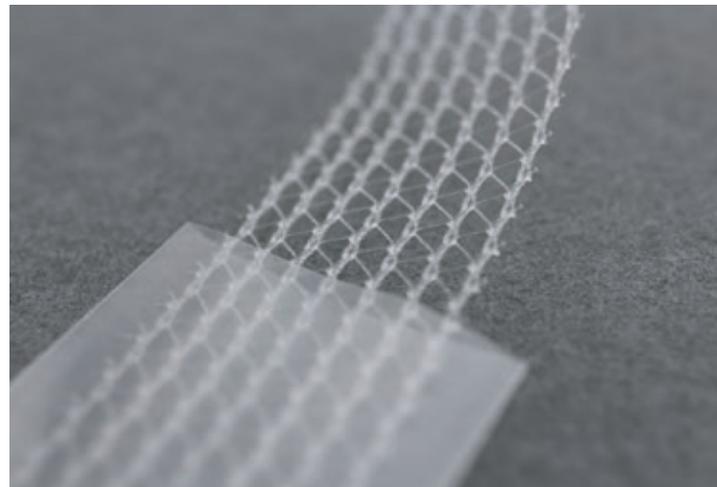



# Dolphin Medical

## **BOLIVIA**

 Clotilde Velasco 4760  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

 (591-3) 342 2120

 [ventasdmb@dolphinmedical.com](mailto:ventasdmb@dolphinmedical.com)

## **CHILE**

 Callao 2970 Of. 806  
Las Condes - Santiago - Chile

 (56 2) 2952 0165

 [ventas@dolphinmedical.com](mailto:ventas@dolphinmedical.com)

## **COLOMBIA**

 Cra 67 No 167-61 Of 607  
Bogotá - Colombia

 (57 1) 31 3412 3620

 [ventasdmc@dolphinmedical.com](mailto:ventasdmc@dolphinmedical.com)

## **PERÚ**

 Jr. Diana M.Z.A D2 lote. 25 INT. 2  
URB Santa María de surco (piso2)  
Santiago de surco, Lima

 (51) 9 3480 1987

 [ventasdmp@dolphinmedical.com](mailto:ventasdmp@dolphinmedical.com)

[www.dolphinmedical.com](http://www.dolphinmedical.com)