



Dolphin Medical



BALÓN POSTPARTO

BALÓN POSTPARTO

REF: 05TD0206

El Balón Postparto es un catéter desechable de múltiples lúmenes conectado a un sistema de globo inflable diseñado para proporcionar taponamiento para controlar la hemorragia del útero y la vagina.



CARACTERÍSTICAS

- El material 100% de silicona permite la comodidad del paciente.
- El diseño del balón en forma de pera se adapta perfectamente al útero, anatomía y forma. Balón súper duradero.
- No requiere ninguna operación quirúrgica para su extracción.
- El catéter de doble lumen permite inflar el balón y monitorear hemorragia.
- Dos jeringas para inflar el balón rápidamente.
- La punta del balón está equipado con válvula de retención.
- Llave de paso de tres vías para un inflado fácil, seguro y rápido.
- El balón puede ingerir hasta 4.000 ml de agua salina. Muy superior a otros productos disponibles en el mercado.

COMPONENTES

- Catéter
- Balón
- Conector Luer-Lock
- Llave de paso de tres vías
- Válvula de retención de una vía
- Espiga para bolsa de suero
- Inyector de 50ml

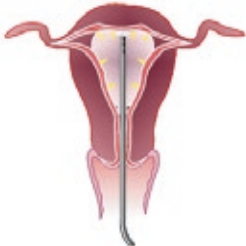
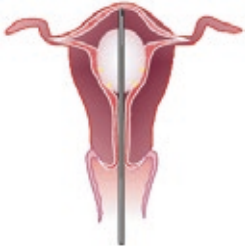

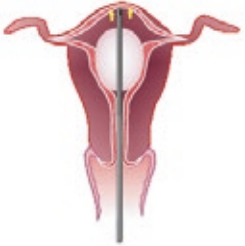
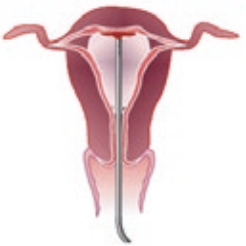
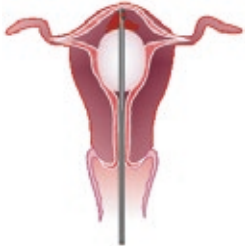




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Diámetro (Tubo) 24Fr
- Longitud del Catéter 587±6mm
- Volúmen de inflación ≤500ml
- Espesor (Balón) 0,7±0,1mm
- Estéril en Óxido de Etileno (OE)



CUADRO COMPARATIVO

PERGO	VENTAJAS	COMPETENCIA
	<p>Porque es más compatible con el útero en forma de pera, el balón inflado está encerrado en el útero y prensa homogéneamente toda la superficie interna del útero.</p>	
	<p>El balón tiene una capacidad de retención de agua de 4L. capacidad sin daño, mientras que el globo de la competencia solo puede contener 2L.</p>	
	<p>El balón Pergo no tiene protuberancia en el extremo distal que puede dañar el útero.</p>	
	<p>Como el canal de recogida de sangre es hacia adentro, permite cerrar fácilmente el paso de sangre. El canal de recaudación de la competencia podría obstruirse fácilmente porque es un canal largo con pequeños agujeros.</p>	
	<p>El balón Pergo está bloqueado en su lugar cuando se llena debido a su forma de útero. El producto de la competencia carece de esta característica de bloqueo.</p>	





Dolphin Medical

BOLIVIA


 Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

 (591-3) 342 2120

 ventasdmb@dolphinmedical.com

CHILE


 Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

 (56 2) 2952 0165

 ventas@dolphinmedical.com


COLOMBIA


 Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia

 (57 1) 31 3412 3620

 ventasdmc@dolphinmedical.com

PERÚ

 Jr. Diana M.Z.A D2 lote. 25 INT. 2
URB Santa María de surco (piso2)
Santiago de surco, Lima

 (51) 9 3480 1987

 ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com