

ANGUILA[®]+

Sling suburetral tipo hamaca Dolphin para técnicas de TOT y TVT



Dolphin Medical

www.dolphinmedical.com




este producto no fue
hecho con látex de
caucho natural


Anguila®+ Cinta Suburetral fabricada a partir de Malla de material 100% polipropileno. Consta de una pieza de malla (cinta) de polipropileno cortada mediante láser que mide: 1,2 y 1,7cm de ancho x 40cm de largo, cubierta en sus extremos con una funda de plástico y lazos con hilo introductor en ambos extremos, para enhebrar las Agujas con ojal para su colocación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 100% Polipropileno monofilamento
- Gramaje: 40g/m²
- Espesor: 0,45mm
- Diámetro del filamento 0,10mm
- Tamaño del poro 1,0 x 1,7mm
- Resistencia al estallido 470 kpa (ISO 13937-1)
- Resistencia a la tracción 250MD - 100CMD N (ISO 13934-1)
- Elongación de ruptura 40% MD - 140% CMD (ISO13934-1)
- Tejido: Macroporo/Monofilamento, mayor integridad tisular y menor riesgo de infección
- Ausencia de partículas y desmalladura, "menor inflamación" e impide la rigidez
- Punta atraumática disminuye la fuerza de tracción
- Brazos protegidos con funda que impide un posible daño tisular
- Brazos con lazos de colores y enhebrador
- Tejido entrelazado "Efecto Memoria", conserva el tamaño original e impide la rigidez
- Corte con láser mayor adhesividad al tejido y menor injuria sobre la mucosa vaginal.
- Estéril en Óxido de Etileno
- Vencimiento 2 años.

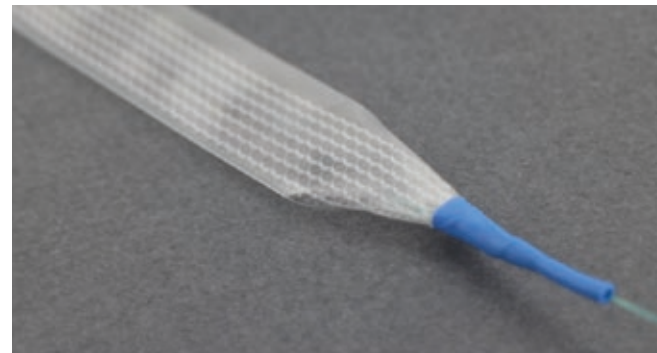

Funda de polietileno ayuda a disminuir el posible daño tisular

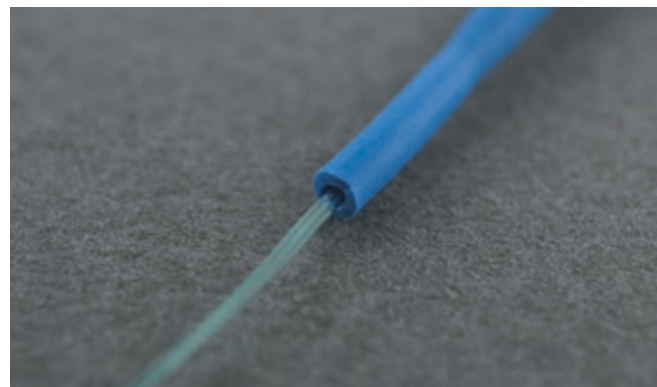


Punta atraumática disminuye la fuerza de tracción





La Anguila® + fué diseñada para el uso como "Hamaca" suburetral para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo ocasionada por hipermovilidad o deficiencia intrínseca del esfínter. El uso de este producto está previsto para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) en mujeres (procedimientos de cinta vaginal libre de tensión (TVT, Trans Vaginal Tape por sus siglas en inglés) y cinta transobturadora (TOT, Trans Obturator Tape, por sus siglas en inglés) estádiseñada para levantar la vejiga o la uretra hacia la posición normal.)


Código	Descripción
REF: DM125101	Anguila®+ 1,2cm
REF: DM125104	Anguila®+ 1,3cm
REF: DM125103	Anguila®+ 1,5cm
REF: DM125102	Anguila®+ 1,7cm

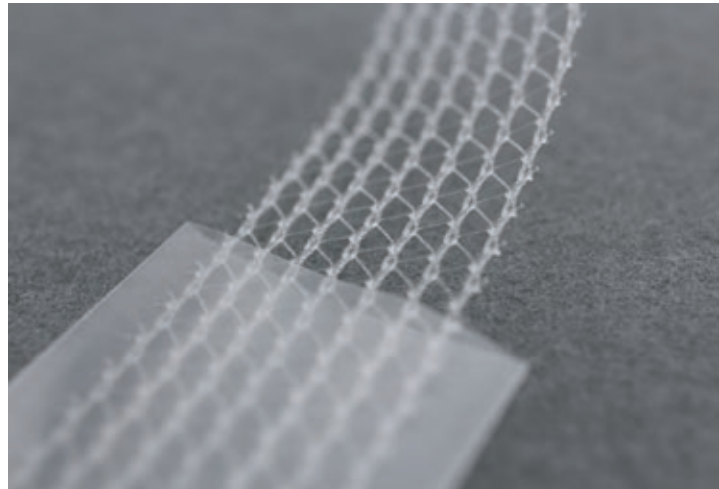




Dolphin Medical

BOLIVIA


 Av. Pirai Esq. Arumá
Edificio Sta.Mónica 2da. Planta
Of. 12 Sta. Cruz de la Sierra.

 (59 1) 7213 3393

 ventasdmb@dolphinmedical.com

CHILE


 Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

 (56 2) 2952 0165

 ventas@dolphinmedical.com


COLOMBIA


 Calle 12 No 2-35 (PH-A)
Cota - Cundinamarca

 (57) 31 7893 8018
(57) 31 7403 6110

 ventasdmc@dolphinmedical.com

PERÚ

 Jr. Diana M.Z.A D2 lote. 25 INT. 2
URB Santa María de surco (piso2)
Santiago de surco, Lima

 (51) 9 3480 1987

 ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com