



Dolphin Medical

Serie SL
PINZA
BIPOLAR AVANZADA
Sella y corta vasos



www.dolphinmedical.com



Precisión
Mandíbula *Maryland*,
disección fina.



Antiadhesivo
Recubrimiento especial con propiedades
antiadherentes de larga duración.



Baja temperatura
Control energético preciso, aislamiento
por ambas caras.



Conveniente
Botón de Activación,
para coagulación rápida



Diseño de aislamiento térmico
Reduce la difusión del calor

**Superficie texturizada
con puntos de cerámica**
Reduce la adherencia
y mejora el agarre

22° mandíbula curva
Visión quirúrgica óptima

SL08

SL0844



SL0837



SL0823




Mandíbula

Vaina



Elemento
de rotación

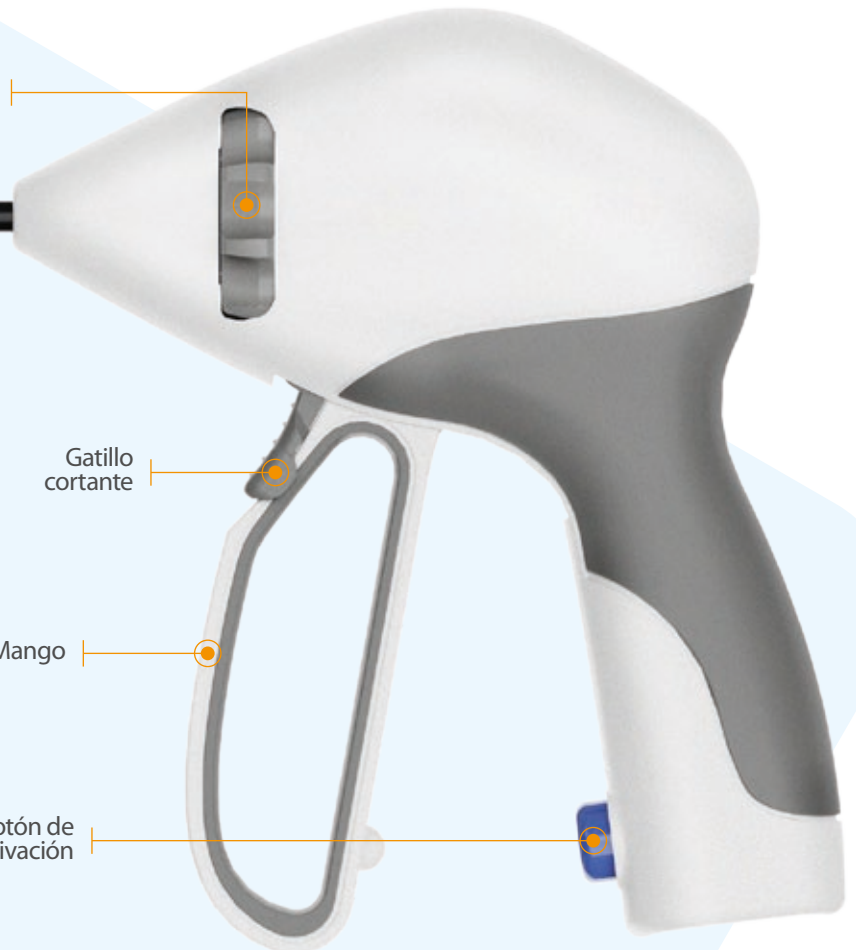

Gatillo
cortante

Mango

Botón de
activación

Dispositivo laparoscópico de
energía bipolar avanzada que
diseca, sella y corta con un solo
instrumento. Mandíbula Maryland
curva de 22° para disección fina y
máxima exposición del campo.





Precisión
Mandíbula *Recta*,
disección fina.



Antiadhesivo
Recubrimiento especial con propiedades
antiadherentes de larga duración.



Baja temperatura
Control energético preciso, aislamiento
por ambas caras.



Conveniente
Botón de Activación,
para coagulación rápida.



Diseño de aislamiento térmico
Reduce la difusión del calor



**Superficie texturizada
con puntos de cerámica**
Reduce la adherencia
y mejora el agarre

SL09

SL0944

SL0937

SL0923

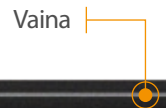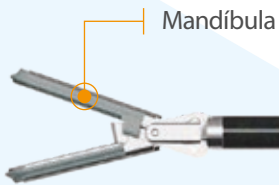

Elemento
de rotación

Botón
de activación

Gatillo
cortante

Mango





Disección, sellado y corte en un solo instrumento.

*SELLADO A BAJA TEMPERATURA,
CORTE SIN SANGRADO*



Modelo	Medida vaina	Medida sellado	Medida corte	Diámetro vaina	Ángulo de rotación	Apertura mandibular
SL0844	44cm	20mm	18.4mm	5mm	350° - 360°	32°
SL0837	37cm	20mm	18.4mm	5mm	350° - 360°	32°
SL0823	23cm	20mm	18.4mm	5mm	350° - 360°	32°

Modelo	Medida Vaina	Medida sellado	Medida corte	Diámetro vaina	Ángulo de rotación	Apertura mandibular
SL0944	44cm	18.3mm	16.8mm	5mm	350° - 360°	45°
SL0937	37cm	18.3mm	16.8mm	5mm	350° - 360°	45°
SL0923	23cm	18.3mm	16.8mm	5mm	350° - 360°	45°





Seguro y confiable



Feedback inteligente



Operación conveniente



SL100M

Aspectos claves

- Monitorización en tiempo real, funcionamiento seguro.
- Regulación inteligente, hemostasia eficiente.
- Protección a baja temperatura, pronóstico favorable.
- Instrumento multifuncional, conveniente y fiable.



Modo

Sellado

Bipolar

Potencia Nominal de Salida

250 W

95 W

Peso

5 kg (11.02 lbs)

Fondo

40 cm (15.75 in)

Ancho

32.5 cm (12.8 in)


Alto

13 cm (5.12 in)

PANEL TÁCTIL

Modo Agiseal

Ajuste de potencia

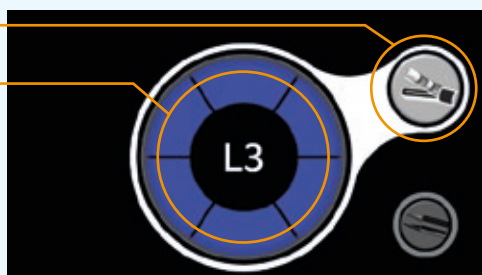

Ajuste de potencia

Modo bipolar



Modo AGISEAL cuenta con 4 niveles

Nivel de Potencia	L	L1	L2	L3
Potencia de salida / W	2	125	150	250

Modo BIPOLAR cuenta con 6 niveles



Nivel de Potencia	D1	D2	D3	D4	D5	D6
Potencia de salida / W	2	15	30	50	75	95





Seguro y confiable

Certificación bajo la MDR, permite un sellado seguro, hemostasia de vasos, conductos linfáticos y tejidos de hasta 7 mm.

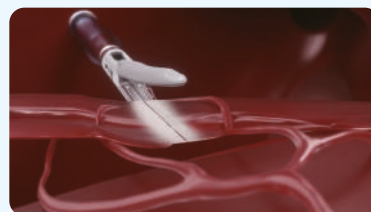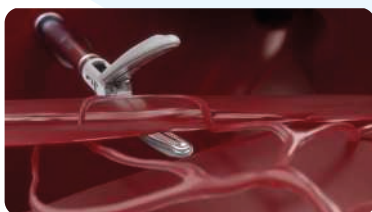

Eficiente e inteligente

Cuenta con más de 1.2 millones de detecciones y ajustes por segundos gracias a su monitoreo, control y retroalimentación inteligente en tiempo real, lo que permite un sellado rápido en 2 segundos y protección a baja temperatura a 60 °C.



Fácil manejo

Control mediante pantalla táctil con memoria inteligente para una configuración y funcionamiento simplificado.





Dolphin Medical

BOLIVIA

-  Av. Pirai, 2do Anillo, Esq. Arumá,
Edificio Sta. Monica, 2da. Planta Of. 8
Sta. Cruz de la Sierra.
-  (59 1) 7213 3393
-  ventasdmb@dolphinmedical.com

CHILE

-  Cerro el Plomo 6000
Las Condes - Santiago - Chile
-  (56 2) 2952 0165
-  ventas@dolphinmedical.com

COLOMBIA

-  Calle 12 No. 2-35 Int. A
Cota - Cundinamarca
-  (57) 31 7893 8018
-  ventasdmc@dolphinmedical.com

PERÚ

-  Jr. Diana Int. 2, MZ. D2, Lote. 25,
1° y 2° Piso URB Sta. Maria de Surco,
Santiago de Surco, Lima
-  (51 9) 3480 1987
-  ventasdmp@dolphinmedical.com



Dolphin Medical

www.dolphinmedical.com